

SPENCER

Made for Decisive Moments

polopoz



KRZESŁA EWAKUACYJNE

- NIKT NIE POZOSTAŁ
- ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA
- ZWIĘKSZENIE MOBILNOŚCI



NIKT NIE POZOSTAŁ

Sytuacje awaryjne w budynkach i miejscu pracy mogą wystąpić w dowolnym momencie.

W sytuacjach takich jak pożary, trzęsienia ziemi, eksplozje lub coś tak prostego jak przerwa w dostawie prądu powoduje, że windy są natychmiast wyłączane z użytku, a ewakuacja osób rannych lub z ograniczeniami ruchowymi może być niezwykle trudna.



Ogień



Eksplzja



Wypadki
Przemysłowe



Substancje
Toksyczne



Kłęski
Żywiotowe



Zaciemnienie



Zawalenie się
Budynków

Kiedy te nieprzewidywalne zdarzenia mają miejsce, naszym zadaniem jest być przygotowanym na skuteczne zarządzanie i kontrolowanie skutków ubocznych oraz ochronę bezpieczeństwa naszego personelu, odwiedzających i klientów, **nie pozostawiając nikogo bez opieki.**

Zwykła inwestycja w krzesła ewakuacyjne może naprawdę mieć znaczenie dla bezpieczeństwa i integracji Państwa obiektu.

Opracowaliśmy zaawansowaną grę krześel ewakuacyjnych - SKID - które mogą usprawnić proces ewakuacji, zapewniając wszystkim skuteczną i płynną ewakuację.

Jako kierownik obiektu zapewnienie bezpieczeństwa Twojego lokalu zapewnia Ci spokój ducha, wiedząc, że podjąłeś wszelkie niezbędne działania, aby chronić dobro wszystkich Twoich pracowników, gości i klientów.



Upośledzenie
mobilności



Ranny

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA



PŁYNNA I BEZPIECZNA EWAKUACJA

W awaryjnej sytuacji dostępność wysokiej jakości sprzętu ewakuacyjnego jest niezbędna, aby szybko, bezpiecznie i sprawnie przetransportować osoby z obrażeniami lub ograniczeniami ruchowymi z miejsca zagrożenia.



CERTYFIKOWANY SPRZĘT

Dostarczane przez nas krzesła ewakuacyjne są wytwarzane w naszych zakładach we Włoszech i są sklasyfikowane jako urządzenia medyczne. W związku z tym posiadają certyfikaty MDR i są stale testowane, aby zapewnić doskonałą wydajność.



ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA

Oferowane przez nas rozwiązania mają na celu zapewnienie jak najlepszej ochrony pacjenta zapewniając jednocześnie, że operatorzy są zabezpieczeni przed obrażeniami podczas podnoszenia i przenoszenia, kiedy korzystają z naszych urządzeń.



MDR

Rozporządzenie (EU) 2017/745



Testowanie

Dedykowany test zderzeniowy



System Zarządzania Jakością

EN ISO 9001:2015
EN ISO 13485:2016 + A11:2021



Nadzor nad Produktem

Posprzedażowy
Monitoring



Działalność spawalnicza

EN ISO 3834 standard



Transparentność

Rejestracja Eudamedu

ZWIĘKSZENIE MOBILNOŚCI

Od ponad 30 lat budujemy jako Spencer sprzęt, który pomaga opiekunom i ratownikom medycznym przeprowadzać czynności ratownicze z pełną kontrolą, gwarantując ochronę zarówno pacjenta jak i operatora.

W naszej siedzibie we Włoszech projektujemy sprzęt medyczny i ewakuacyjny, który zapewnia wysokie standardy użyteczności, wytrzymałości i niezawodności w decydujących momentach.



► **34**

Lata Doświadczeń



► **162**

Kraje



► **4.500+**

Odbiorców

CO MÓWIĄ O NAS?

J. Tinkler

Credit Controller, Plimsoll Publishing Ltd

"W ubiegłym roku byłem ewakuowany z mojego biura z trzeciego piętra na krześle ewakuacyjnym PRO-SKID. Nie mogłem uwierzyć, jak szybko i bezpiecznie sprowadził mnie na parter i opuścił budynek. Czuję się pewniej, wiedząc, że to urządzenie jest zawsze pod ręką, w razie niebezpieczeństwa."

A. Digas

CEO, Digas G. Medical

"W przeciwieństwie do krzeseł ewakuacyjnych dostarczanych przez innych dostawców, za każdym razem, gdy demonstruję użycie krzesła SKID na schodach, na którym siedzą moi klienci, moje plecy nigdy nie cierpią."

Nicolas Vannieuwenhuyze

Managing Director, Covarmed

"Tym, co imponuje w krześle ewakuacyjnym SKID, jest rozmiar kół, dzięki którym krzesło może poruszać się bez wysiłku przez całe korytarze i dziedzińce do wyznaczonego punktu zbiórki ewakuacyjnej."

KRZESŁA EWAKUACYJNE

PRO SKID-E

SKID-OK

SKID-E

Dla osób z ograniczeniami ruchowymi lub kontuzjami, **krzesła ewakuacyjne firmy Spencer są najlepszą gwarancją szybkiego i płynnego zjazdu po schodach** w sytuacji awaryjnej w wielopiętrowym budynku.

Wyposażone w tory ułatwiające poruszanie się po schodach, zapewniają operatorowi większą **kontrolę** i **stabilność** w decydujących momentach.



DLACZEGO



Dostępność krzeseł ewakuacyjnych SKID w Twoim obiekcie pomaga stworzyć poczucie bezpieczeństwa dla wszystkich się w nim znajdujących, gdyż zwiększa gotowość na wypadek sytuacji kryzysowych, zapewnia równe szanse osobom o ograniczonej sprawności ruchowej i daje spokój ducha - wiedząc, że podjąłeś wszystkie niezbędne kroki w celu ochrony bezpieczeństwa Twoich pracowników, gości i klientów.



CO

SKID Spencera to lekkie i wytrzymałe składane krzesła, które pomagają w kontrolowanej i bezpiecznej ewakuacji osób niepełnosprawnych po schodach. Krzesło PRO-SKID można podnieść, aby pokonać przeszkody i przenieść pacjentów na górę.



KIEDY

Podczas sytuacji awaryjnej w budynkach wielokondygnacyjnych, gdy windy są niedostępne lub zbyt ciasne dla wózków z noszami, krzesła SKID Spencera można rozłożyć w ciągu kilku sekund i pomóc w ewakuacji osób z ograniczeniami ruchowymi po schodach.



GDZIE

Krzesła SKID Spencera są zawsze składane w pobliżu schodów. Można je wykorzystać do zejścia po schodach lub ewakuacji osób niepełnosprawnych po płaskiej powierzchni do wyznaczonego miejsca zbiórki.



KTO

Urządzenia te są niezbędnym wyposażeniem dla osób zarządzających obiektami i ochroną ponieważ zapewniają, że personel, goście lub klienci z ograniczeniami ruchowymi (lub ranni) mogą zostać bezpiecznie ewakuowani z budynków wielopiętrowych w sytuacji awaryjnej.




[emergency-rescue-equipment/evacuation-chairs](https://www.spencer.it/en/emergency-rescue-equipment/evacuation-chairs)

PRO SKID-E

EWAKUACYJNE I TRANSPORTOWE KRZESŁO

Jednocześnie lekkie i wytrzymałe, krzesło PRO SKID-E posiada parę teleskopowych uchwytów z przodu i z tyłu dzięki czemu nadaje się zarówno do wchodzenia i schodzenia po schodach.

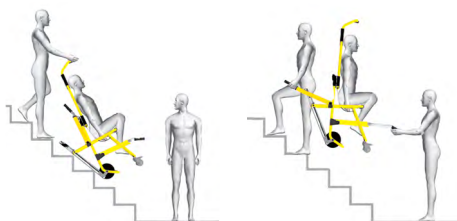

Modele	PRO SKID-E
Kody	SK10001E
Kolor ramy żółty	Żółty
Waga	14,2 kg
Ładowność	250 kg
długość (uchwyty złożone/rozłożone)	111 / 145 cm
Wysokość (min/maks)	107 / 160 cm
Szerokość	55 cm
Wymiary po złożeniu	33x55x107 cm
Wymiary po rozłożeniu	111/145x55x160 cm
Przednie/tylne koła	Ø 10 / Ø 20 cm
Materiał	Al, PVC, PP, PU

AKCESORIÓW

RIST136A	Pasy bezpieczeństwa z plastikową klamrą (dołączone)
SK14000B	SKID/ProSKID wsporniki do montażu na ścianie
SK21002E	SKID pokrywa ochronna
SK21000E	SKID worek chroniący przed kurzem
SK13018B	Pasy zabezpieczające kostki



RIST136A



SK14000B



SK21002E




SK21000E

IDEALNE DO PŁYNNEGO I KONTROLOWANEGO SCHODZENIA PO SCHODACH
PRO SKID-E MOŻNA PODNIEŚĆ, ABY WEJŚĆ NA GÓRĘ LUB POKONAĆ PRZESZKODY.



GLÓWNE CECHY

Klarowne graficzne instrukcje są dostępne z tyłu zagłówka.

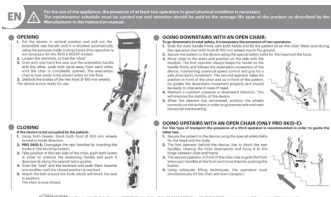

Tylne uchwyty umożliwiają podniesienie krzesła.

Wzmocnione gąsiennice zapewniają większą kontrolę i płynny ruch podczas schodzenia po schodach.

Tylne koła Ø20 cm zmniejszają tarcie i ułatwiają przemieszczanie się po płaskiej powierzchni.

Wypozażone w obrotowe koła przednie (Ø10 cm) z hamulcami.



Ergonomiczny wysuwany uchwyt poprawia przyczepność podczas schodzenia po schodach.

Regulowany zagłówek jest wyposażony w pasek.

Aluminiowa rama zmniejsza wagę ogólną krzesła i zwiększa jego wytrzymałość.

Wypozażone w 2 propylenowe 50mm pasy przytrzymujące.

Regulowane, wzmocnione siedzisko z PVC zapewnia większy komfort i jest łatwe do mycia.

2 wysuwane uchwyty z przodu pozwalają, że krzesło nadaje się do transportu w górę po schodach.

Podnóżek zapewnia większą stabilność i poprawia krążenie krwi pacjenta.

SKID-OK

KRZESŁO OCENY ŚWIATŁA

SKID-OK jest kompaktowym krzesłem schodowym z całkowitą wagą tylko 10kg. Jego lekka konstrukcja sprawia, że jest szczególnie zwrotny w ciasnych przestrzeniach lub gdy schody są zbyt wąskie, a mimo to Skid-OK może udźwignąć ciężar do 250 kg.



Modele	SKID-OK	SKID-OK (B)
Kody	SK20003E	SK20002E
Kolor ramy	Chromowany	Chromowany
Waga	10 kg	10 kg
Ładowność	250 kg	250 kg
Długość	90 cm	90 cm
Wysokość (min/max)	104 / 154 cm	104 / 154 cm
Szerokość	52 cm	52 cm
Wymiar po złożeniu	17,5x52x104 cm	17,5x52x104 cm
Wymiar po otwarciu	90x52x154 cm	90x52x154 cm
Przednie/tylne koła	Ø 10 / Ø 15 cm	Ø 10 / Ø 15 cm
Materiał	Al, PVC, PP, PU	Al, PVC, PP, PU
Podłokietnik pacjenta	Niedostępny	Dostępny

AKCESORIÓW

RIST136A	Pasy zabezpieczające z plastikową klamrą (dołączone)
SK14001E	Skid-OK wspornik do montażu na ścianie
SK21004E	Skid- OK torba do noszenia
SK13018B	Pasy zabezpieczające kostki



RIST136A



SK14001B




SK21004E

➤ **IDEALNE DO EWAKUACJI NA WĄSKICH SCHODACH ZE WZGLĘDU NA MAŁĄ WAGĘ I KOMPAKTOWY WYMIAR.** ➤




GŁÓWNE CECHY

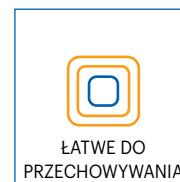

SKID-OK

Klarowne graficzne instrukcje są dostępne z tyłu zagłówka.

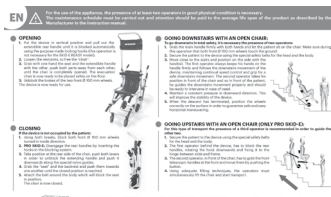

Ergonomiczny wysuwany uchwyt poprawia przyczepność podczas schodzenia po schodach.

Regulowany zagłówek jest wyposażony w pasek.

Aluminiowa rama zmniejsza wagę ogólną krzesła i zwiększa jego wytrzymałość.

Wzmocnione gąsiennice zapewniają większą kontrolę i płynne ruchy podczas schodzenia po schodach.

Podłokietniki dla pacjentów dają poczucie większego bezpieczeństwa (tylko dla wersji SKID- OK B).

Wyposażone w 2 polypropenowe 50 mm paski wzmacniające.

Kompaktowa konstrukcja umożliwia ewakuację w wąskich kłatkach schodowych.

Regulowane, wzmocnione siedzisko z PVC zapewnia większy komfort i jest łatwe do mycia.

Tylne koła Ø15 cm zmniejszają tarcie i ułatwiają przenoszenie pacjentów po płaskiej powierzchni.

Podnóżek zapewnia większą stabilność i poprawia krążenie krwi pacjenta.

Wyposażone w obrotowe koła (Ø10 cm) z hamulcem.



SKID-E

GOTOWE DO UŻYCIA KRZESŁO EWAKUACYJNE

SKID-E oferuje wysoki poziom zwrotności i kontroli w bardzo przystępnej cenie.

Dzięki kompaktowej ramie sprawdza się dobrze w ograniczonych przestrzeniach, a jednocześnie może udźwignąć do 250 kg.



Modele	SKID-E	SKID-E MAX
Kody	SK20001E	SK20014E
Kolor ramy	Chromowany	Chromowany
Waga	12,7 kg	12,7 kg
Ładowność	180 kg	250 kg
Długość	90 cm	
Wysokość(min/max)	107 / 160 cm	
Szerokość	53 cm	
Wymiary po złożeniu	33x53x107 cm	
Wymiary po otwarciu	90x53x160 cm	
Przednie/tylne koła	Ø 10 / Ø 20 cm	
Materiał	Al, PVC, PP, PU	

AKCESORIÓW

RIST136A	Pasy zabezpieczające z plastikową klamrą (dołączone)
SK14000B	SKID/ProSKID wsporniki do montażu na ścianie
SK21002E	SKID pokrywa ochronna
SK21000E	SKID worek chroniący przed kurzem
SK13018B	Pasy zabezpieczające kostki



RIST136A



SK14000B



SK21002E



SK21000E

ŁATWE W ROZKŁADANIU I STEROWANIU KRZESŁO SKID-E NADAJE SIĘ DO EWAKUACJI W CIASNYCH PRZESTRZENIACH.




GLÓWNE CECHY



SKID-E

Klarowne graficzne instrukcje są dostępne z tyłu zagłówka.

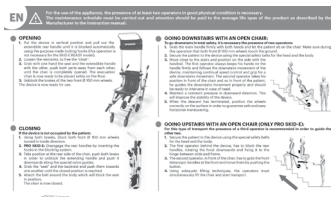

Ergonomiczny wysuwany uchwyt poprawia przyczepność podczas schodzenia po schodach.

Regulowany zagłówek jest wyposażony w pasek.

Aluminiowa rama zmniejsza wagę ogólną krzesła i zwiększa jego wytrzymałość.

Wzmocnione gąsiennice zapewniają większą kontrolę i płynne ruchy podczas schodzenia po schodach.

Wyposażone w 2 polipropenowe 50 mm **paski wzmacniające**.

Kompaktowa konstrukcja umożliwia ewakuację w wąskich kłatkach schodowych.

Regulowane, wzmocnione **siedzisko** z PVC zapewnia większy komfort i jest łatwe do mycia.

Tylne koła **Ø20 cm** zmniejszają tarcie i ułatwiają przemieszczanie się po płaskiej powierzchni.

Podnóżek zapewnia większą stabilność i poprawia krążenie krwi pacjenta.

Wyposażone w **obrotowe koła** (Ø10 cm) z hamulcem.



POSUMOWANIE CECH KRZESŁA SKID

N°	CECHA	MATERIAŁ	PRO SKID-E	SKID-OK	SKID-OK B	SKID-E	SKID-E MAX
1	Wzmocnione gąsiennice (n° 2)	Aluminium	●	●	●	●	●
2	Ergonomicznie wysuwany uchwyt	Aluminium	●	●	●	●	●
3	Regulowany zagłówek	PVC	●	●	●	●	●
4	Przedni podnóżek	Aluminium	●	●	●	●	●
5	Przednie uchwyty	Aluminium	●				
6	Tylne uchwyty	Aluminium	●				
7	Wzmocnione siedzisko	PVC	●	●	●	●	●
8	Oparcie	PVC	●	●	●	●	●
9	Tylne koła Ø20 cm (n° 2)		●			●	●
10	Koła przednie, Ø10 cm z hamulcem (n° 2)	Polipropylen	●	●	●	●	●
11	Paski przytrzymujące ciało	Nylon, plastik, stal chromowana	●	●	●	●	●
12	Podłokietnik	Aluminium			●		
13	Ładowność 250 kg		●	●	●		●





POL-POŻ Kołton Spółka Jawna
26-600 Radom, ul. Tartaczna 10 A
Tel. +48 48 362 53 15



E-MAIL
info@pol-poz.pl



Spencer eksportuje swoje produkty do 162 krajów na świecie, gdzie nie zawsze obowiązują te same standardy operacyjne i zatwierdzające. Z tego powodu mogą występować różnice pomiędzy wszystkimi opisanymi a dostarczonymi warunkami. Spencer stale pracuje nad udoskonaleniem wszystkich produktów. W tym celu liczymy na Państwa zrozumienie, zastrzegając sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian w formach, kolorze, sprzęcie i technice w odniesieniu do wszystkiego, co jest tutaj zawarte.

@Wszystkie prawa zastrzeżone

Kopiowanie nawet częściowe, bez autoryzacji jest zabronione.

Jakiegolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiału fotograficznego zawartego w katalogu jest zabronione. Nadawanie w internecie, telewizji lub nieautoryzowana publikacja publiczna będzie ścigana na drodze prawnej.


SPENCER



Rev.0/2023